



Vertrieb Schweiz: all4care

Route du Verney 18 • CH - 1070 Puidoux
Fon: +41 (0) 279 221 78 10
E-Mail: diagnostik@all4care.ch
Web: all4care.ch


Weitere Produkte der **DIAGNOSTICline**

- **GALILEO** High-End Urodynamik-System + Video
- **NEWTON** kompaktes, flexibles Urodynamik-System
- **KOPERNIKUS** kombiniertes Uroflowmetrie- & EMG-Messsystem
- **CASSINI** Analmanometrie mit EMG
- **SMARTFLOW** kabelloses Uroflow-Messsystem

NEXT GENERATION UROFLOWMETRIE

Im steten Dialog mit Anwendern und in enger Zusammenarbeit mit Fachärzten und Forschungseinrichtungen entwickelt **tic** Medizintechnik anspruchsvolle, diagnostische Lösungen für den urologisch, gynäkologisch und proktologisch orientierten Mediziner in den Bereichen Funktionsdiagnostik, Beckenboden- und Impotenztherapie.

Unsere Diagnose- und Therapiesysteme genießen im niedergelassenen Bereich, Krankenhäusern, Privatkliniken und führenden Universitätskliniken einen hervorragenden Ruf. Bei der Produktentwicklung stellen die Themen Leistung und Sicherheit unsere obersten Maximen dar, welche wir zu keiner Zeit aus den Augen verlieren.

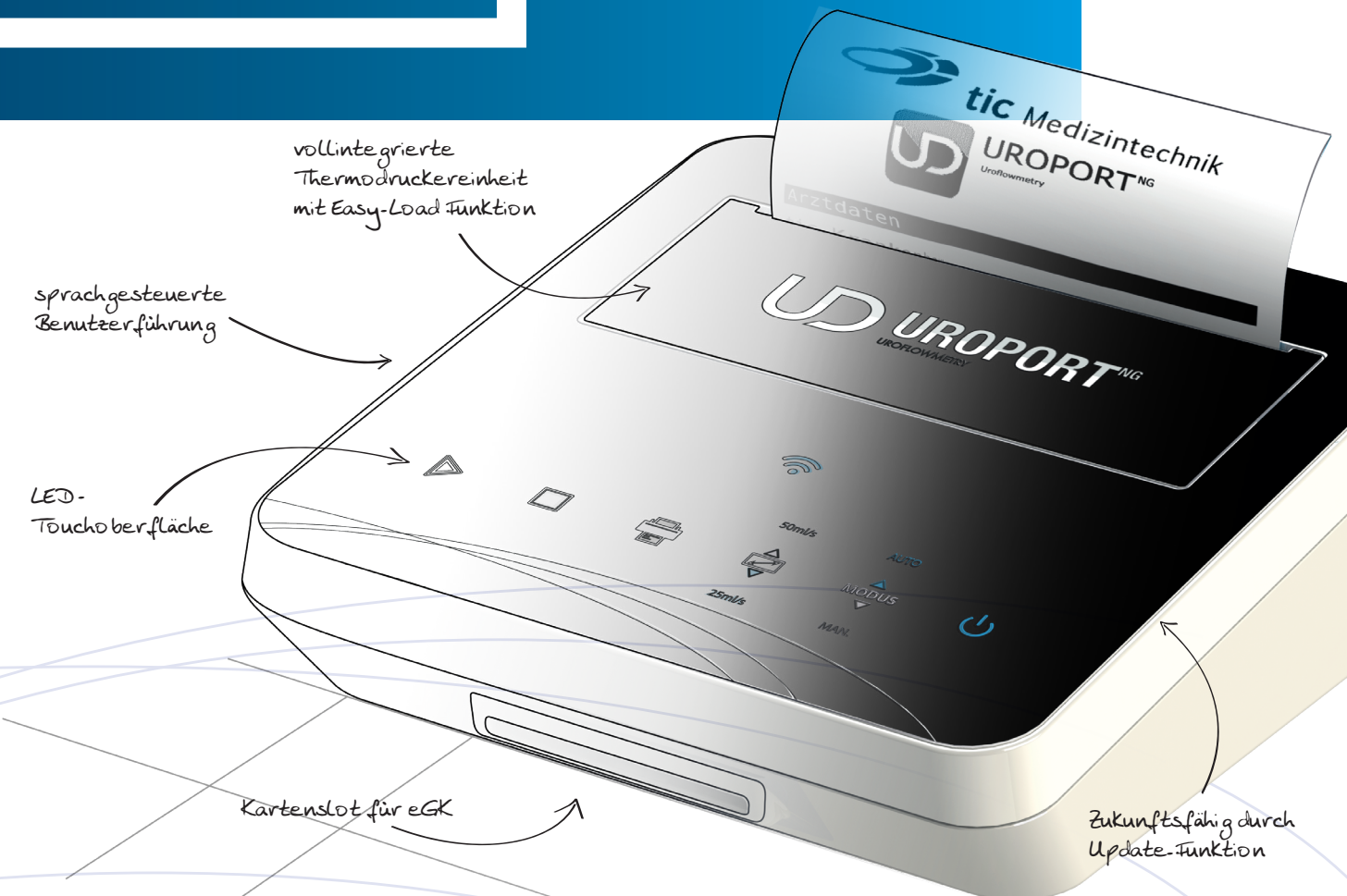

Arztdaten

Praxis Dr. Mustermann
Urologie
Musterstr. 0
00000 Musterstadt


Patientenstammdaten

Patient :
Geb.-Dat.:
Straße :
Wohnort :
Krankenk.:
Ver.-Nr. :
Messung : 06.07.2021 14:11


Messergebnisse Uroflowmetrie

Maximale Flussrate Qmax : 20,2 ml/s
Mittlere Flussrate Qave : 15,5 ml/s
Gesamtvolumen Vcomp : 225,9 ml
Miktionszeit Tmik : 14,6 s
Flusszeit T100 : 14,6 s
Zeit bis Qmax TQmax : 12,1 s
Volumen bei Qmax VQmax : 207,5 ml


Siroky Nomogramm

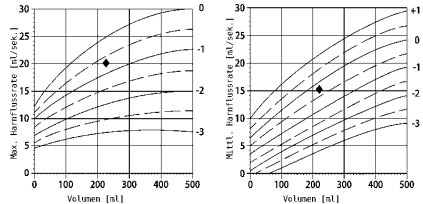



Liverpool Nomogramm Frau

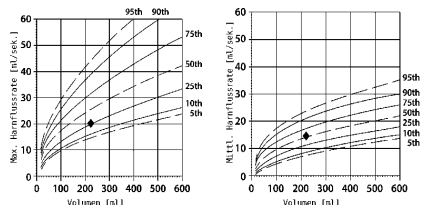

Liverpool Nomogramm Mann

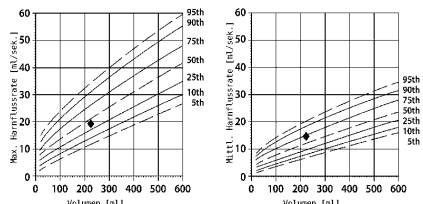

Liverpool Nomogramm Mann über 50

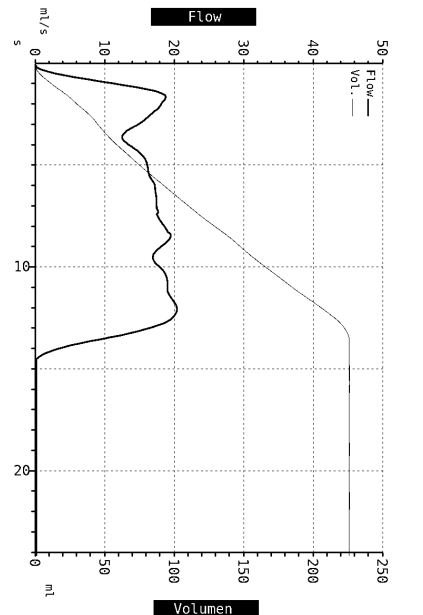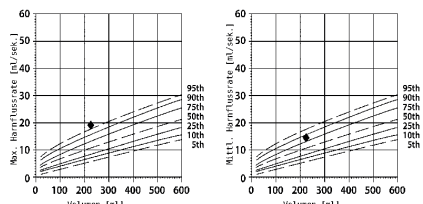

Uroflowmetrie-System

innovative Basisdiagnostik mit Sprachwiedergabe

BASISDIAGNOSTIK DER UROPORT^{NG}

Ausdruck
einer Messung mit
dem UROPORT^{NG}

Der UROPORT^{NG} wurde als
leistungsfähiges, kostengünstiges
Uroflowmetrie-System speziell
für den täglichen Bedarf in Praxis
und Klinik entwickelt.

Die Highlights

- innovative Bedienung mit Sprachunterstützung
- 4" Hochgeschwindigkeitsthermodrucker mit Easy-Load Funktion
- hochpräzise Wägeeinheit
- optionale Wandmontage
- schnell einsatzbereit und leicht zu reinigen
- Skalierung der Volumenkurve (25 ml/s oder 50 ml/s)
- einstellbare Messmodi (automatisch/manuell)
- Bestimmung der Harnflussparameter gemäß ICS-Standard
- Siroky- und Liverpool-Nomogramme (optional), deaktivierbar
- Kartenlesegerät für die elektronische (G2)-Gesundheitskarte (optional)
- Individualisierung des Ausdrucks (Arzt/Klinik-Information/Logo)
- Zukunftsfähig durch Update-Funktion

